


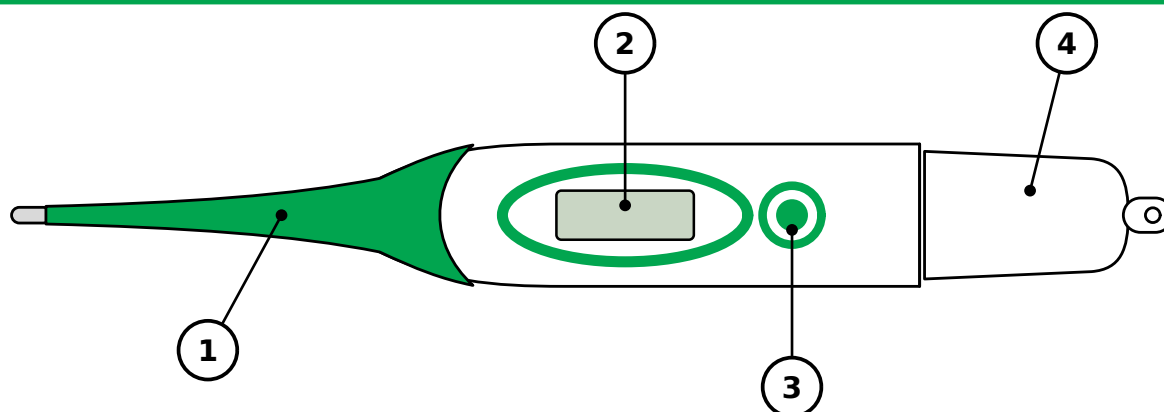

1 Ponta flexível

2 Visor LCD

3 Botão liga/desliga

4 Tampa da bateria

Apresentação

O Termômetro Veterinário Digital Ponta Flexível Walmur mede a temperatura corporal de animais por via retal. A ponta flexível acompanha pequenos movimentos do animal, trazendo mais conforto e praticidade.

Características

- Ponta flexível
- Seleção entre °C e °F
- Visor LCD de 4 dígitos
- Modo silencioso
- Medição rápida
- Desligamento automático
- Aviso sonoro ao final
- Resistente à água
- Memória da última medição
- Bateria substituível

Especificações técnicas

Faixa de medição	32,0 °C a 43,9 °C (90,0 °F a 111,0 °F)
Precisão em °C	±0,2 °C abaixo de 35,0 °C ±0,1 °C de 35,0 a 39,0 °C ±0,2 °C acima de 39,0 °C
Precisão em °F	±0,3 °F abaixo de 95,0 °F ±0,2 °F de 95,0 a 102,2 °F ±0,3 °F acima de 102,2 °F
Visor	LCD de 4 dígitos
Memória	Última medição
Bateria	1 bateria botão 1,5 V - LR41 (L736F)
Consumo	0,15 mW em medição
Autonomia	Mais de 200 horas de uso contínuo
Desligamento automático	Após aprox. 10 min sem uso
Proteção	Resistente à água (não mergulhar)

Como usar

- Limpe e desinfete a ponta com álcool.
- Pressione ON/OFF. Todos os segmentos do visor (188.8) aparecem por cerca de 2 segundos.
- Em seguida, o visor mostra a última medição (ou Lo) e o símbolo °C pisca: o termômetro está pronto.
- Logo em seguida**, introduza com cuidado a ponta no reto do animal. Se demorar, o aviso sonoro pode tocar antes da hora.

5. Mantenha o termômetro firme. Durante a medição, o °C continua piscando.

6. Quando o símbolo parar de piscar e soar o aviso, a medição terminou. Retire e leia a temperatura.

7. Desligue e higienize novamente a ponta.

IMPORTANTE: faça a contenção adequada do animal antes da medição, para evitar movimentos bruscos, acidentes e lesões.

Funções

Memória da última medição

Ao ligar, o visor mostra por alguns instantes a última temperatura medida, antes de ficar pronto para nova medição.

Alternar entre °C e °F

Com o termômetro **desligado**, mantenha o botão ON/OFF pressionado por cerca de 4 segundos ao ligar. A unidade alterna entre °C e °F. No Brasil, recomenda-se manter em °C.

Modo silencioso

Ligue o termômetro e não inicie a medição. Após cerca de 10 segundos, ele emite 10 bipes. A partir daí, mede sem o aviso sonoro final: acompanhe o visor até o °C parar de piscar.

Desligamento automático

Sem uso, desliga sozinho após cerca de 10 minutos. Sempre que possível, desligue manualmente para poupar a bateria.

Limpeza e conservação


- Limpe e desinfete a ponta antes e depois de cada uso, com álcool em pano, gaze ou algodão.
- Não mergulhe** o termômetro em água, álcool ou outro líquido: ele é resistente à água, mas não é submersível.
- Não use solventes, diluentes ou produtos abrasivos.
- Deixe secar e guarde em local limpo e seco, protegido de impactos, calor, umidade e sol direto.

Troca da bateria

Troque a bateria quando o símbolo de bateria fraca aparecer no visor.

1. Retire a tampa do compartimento da bateria.
2. Remova a bateria usada com um palito ou objeto não metálico.
3. Coloque uma bateria nova de 1,5 V (LR41 / L736F) com o **positivo (+) para cima**.
4. Recoloque a tampa e encaixe-a firmemente.

(+) para cima

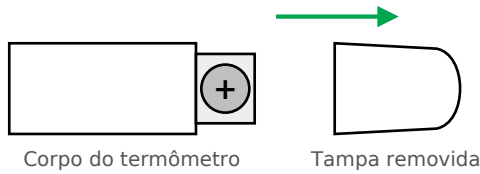

ATENÇÃO: não recarregue a bateria e não a jogue no fogo: há risco de vazamento ou explosão.

Precauções

- Produto de uso veterinário. Use somente para a finalidade descrita neste manual.
- Não bata, não deixe cair e não desmonte o termômetro.
- Não dobre excessivamente a ponta flexível.
- Não use o produto se apresentar rachaduras, deformações ou outros danos.
- Higienize o termômetro entre um animal e outro.
- Mantenha o termômetro e a bateria fora do alcance de crianças.

A temperatura normal varia conforme espécie, idade, ambiente e estado do animal. Em caso de resultados anormais ou dúvidas, consulte um Médico-Veterinário.

Solução de problemas

Não liga	Verifique se a bateria está com o (+) para cima. Se necessário, troque por uma nova LR41.
Bateria fraca no visor	Troque a bateria (LR41 / L736F, 1,5 V).
Aviso tocou antes de medir	O termômetro ficou muito tempo ligado antes da medição. Desligue, ligue de novo e introduza a ponta logo em seguida.
Visor mostra "Lo"	Temperatura abaixo de 32,0 °C ou ponta mal posicionada. Repita a medição.
Leitura duvidosa	Repita a medição mantendo o termômetro firme.
Termômetro danificado	Não use o produto e contate o atendimento.

Descarte

Não descarte a bateria no fogo. Ao final da vida útil, encaminhe bateria e termômetro para pontos de coleta adequados, conforme as normas ambientais locais.

Garantia

GARANTIA DE 6 (SEIS) MESES a partir da data de aquisição, mediante apresentação da nota fiscal de compra. Este prazo já inclui a garantia legal de 90 dias prevista no Código de Defesa do Consumidor.

A garantia restringe-se a defeitos de fabricação e **não cobre problemas causados por mau uso**, como:

1. Quedas, batidas ou pressão excessiva;
2. Imersão em líquidos ou contato com solventes e produtos abrasivos;
3. Dobra excessiva ou rompimento da ponta flexível;
4. Desmontagem, modificação ou reparo por pessoas não autorizadas;
5. Vazamento de bateria ou bateria com polaridade invertida;
6. A bateria, por ser item de consumo.

Para assistência técnica, ligue **(51) 3343-5844**, chame no WhatsApp **(51) 9.9858-0703** ou procure a revenda onde o produto foi adquirido.

Atendimento

Telefone	(51) 3343-5844
WhatsApp	(51) 9.9858-0703
E-mail	walmur@walmur.com.br
Site	www.walmur.com.br



Walmur Instrumentos Veterinários Ltda.
Rua Ernesto Fontoura, 231 – Bairro São Geraldo
CEP 90230-091 – Porto Alegre/RS
Fone/Fax: (51) 3343-5844